



SAM[®] IO Adaptor | Instructions for Use

DESCRIPTION:

The SAM IO Adaptor attaches to the SAM IO Driver to accommodate alternative IO needle designs. The Adaptor snaps into place around the hub of the needle and is then connected to the SAM IO Driver in the same fashion as the SAM IO Needle. Consult all relevant Instructions for Use. Additional product information can be found at sammedical.com

PRODUCT INFORMATION:

Adaptor Ref. number: IO742-EN
Applied Parts: SAM IO Adaptor


IMPORTANT INFORMATION FOR USERS:

For SAM IO Intraosseous Access System products to perform properly, the following conditions are recommended.






- Use this product only in accordance with this manual and applicable product labeling.
- Adjustments, modifications, technical maintenance or repairs are not allowed.
- The SAM IO Adaptor is a single-use device.

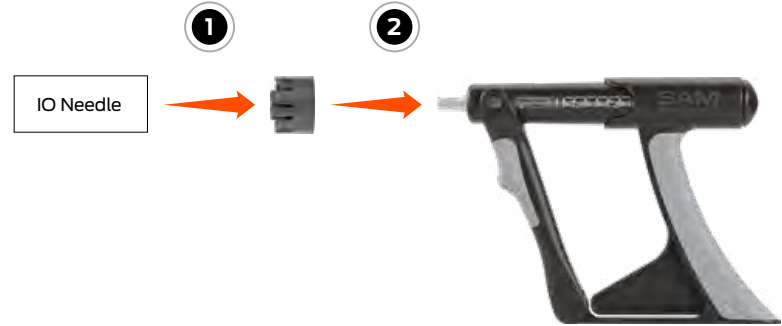
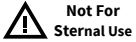


INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Attach intraosseous needle to the Adaptor. The Adaptor snaps into place around the hub of the needle.
1. Attach Adaptor to the SAM IO Driver.
2. Note: The SAM IO Needle Assembly is not intended for use with the Adaptor. The SAM IO Needle Assembly should be attached directly to the driver without the Adaptor.
3. Reference the relevant Instructions for Use to complete procedure.





SYMBOL GLOSSARY:

| | |
|---|---|
| For prescription use only. |  |
| Indicates the need for the user to consult the instructions for use. |  |
| Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU Directive 93/42/EEC. |  |
| Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified. |  |
| Indicates the manufacturer's catalog number so that the medical device can be identified. |  |

| | |
|---|---|
| Indicates the need for the user to consult the instructions for use for important cautionary information such as warnings and precautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the medical device itself. |  |
| Not for Sternal use. |  |
| Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process. |  |
| Indicates a medical device that is intended for one use, or for use on a single patient during a single procedure. |  |

SAM04040 A

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| <h1>ADAPTOR</h1> <p>QTY: 1</p> | <p>Customer Service & Product Support: Toll Free: 800.818.4726 (USA) Tel: 503.639.5474 (USA) Fax: 503.639.5425 (USA) technical.support@sammedical.com</p> |  | <h1>SAM[®]</h1> <h2>MEDICAL</h2> |
| | |  <p>SAM Medical Products® 12200 SW Tualatin Rd, Ste 200 Tualatin, OR 97062 US</p> | |

sammedical.com

IO-Adaptor-IFU-1



Adaptateur **SAM**[®] IO | Mode d'emploi

DESCRIPTION :

L'adaptateur SAM IO se fixe à la perceuse SAM IO et permet d'utiliser d'autres modèles d'aiguille IO. L'adaptateur s'enclenche autour de l'embase de l'aiguille, puis est raccordé à la perceuse SAM IO de la même manière que l'aiguille SAM IO. Consulter tous les modes d'emploi correspondants. D'autres renseignements sur le produit figurent sur le site sammedical.com

INFORMATION SUR LE PRODUIT :

Numéro de réf. de l'adaptateur : IO742-EN
Parties appliquées : adaptateur SAM IO


RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LES UTILISATEURS :

Pour que les produits du SAM IO Intraosseous Access System (Système de perfusion intra-osseuse SAM IO) fonctionnent correctement, les conditions suivantes sont recommandées.






- N'utiliser ce produit que conformément à ce manuel et à l'étiquetage en vigueur.
- Les réglages, les modifications, l'entretien technique ou les réparations ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur SAM IO est un dispositif à usage unique.

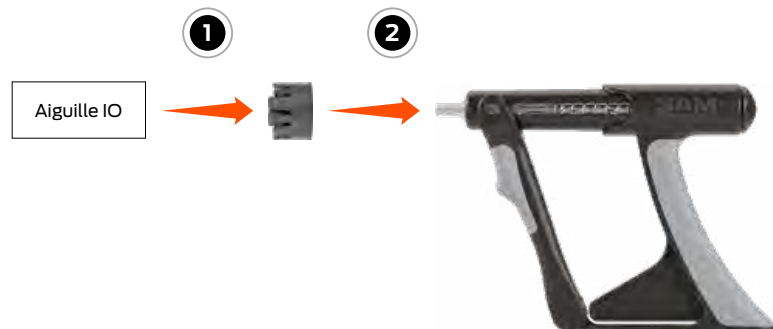



MODE D'EMPLOI :

1. Fixer l'aiguille intra-osseuse à l'adaptateur. L'adaptateur s'enclenche autour de l'embase de l'aiguille.
1. Fixer l'adaptateur à la perceuse SAM IO.
2. REMARQUE : L'aiguille SAM IO n'est pas destinée à un usage avec l'adaptateur. L'aiguille SAM IO doit être raccordée directement à la perceuse sans l'adaptateur.
3. Se reporter au mode d'emploi correspondant pour une description complète de l'intervention.





GLOSSAIRE DES SYMBOLES :






| | |
|---|---|
| Sur ordonnance seulement. |  |
| Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi. |  |
| Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini par la directive européenne 93/42/CEE. |  |
| Indique le code de lot du fabricant permettant d'identifier le lot. |  |
| Indique le numéro de référence du fabricant permettant d'identifier le dispositif médical. |  |


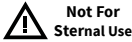


| | |
|---|---|
| Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi pour vérifier les précautions importantes, telles que les avertissements et mises en garde, qui ne peuvent pas être présentées sur le dispositif médical lui-même, pour diverses raisons. |  |
| Non destiné aux perfusions sternales. |  |
| Indique un dispositif médical qui n'a pas été soumis à un processus de stérilisation. |  |
| Indique un dispositif médical destiné à un usage unique, ou à un seul patient au cours d'une intervention unique. |  |

SAM04040 A




| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>ADAPTATEUR</p> <p>QTÉ : 1</p> | <p>Service après-vente et soutien technique :</p> <p>Numéro sans frais : 800 818-4726 (États-Unis) Téléphone : +1 503 639-5474 (États-Unis) Télécopieur : +1 503 639-5425 (États-Unis)</p> <p>technical.support@sammedical.com</p> |  | <p>SAM[®]</p> <p>MEDICAL</p> |
| |  <p>SAM Medical Products[®] 12200 SW Tualatin Rd, Ste 200 Tualatin, OR 97062 États-Unis</p> | | |

SYMBOL GLOSSARY:

| | |
|---|---|
| For prescription use only. |  |
| Indicates the need for the user to consult the instructions for use. |  |
| Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU Directive 93/42/EEC. |  |
| Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified. |  |
| Indicates the manufacturer's catalog number so that the medical device can be identified. |  |

| | |
|---|---|
| Indicates the need for the user to consult the instructions for use for important cautionary information such as warnings and precautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the medical device itself. |  |
| Not for Sternal use. |  |
| Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process. |  |
| Indicates a medical device that is intended for one use, or for use on a single patient during a single procedure. |  |

SAM04040 A

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| <h1>ADAPTOR</h1> <p>QTY: 1</p> | <p>Customer Service & Product Support: Toll Free: 800.818.4726 (USA) Tel: 503.639.5474 (USA) Fax: 503.639.5425 (USA) technical.support@sammedical.com</p> |  |  |
| | |  <p>SAM Medical Products® 12200 SW Tualatin Rd, Ste 200 Tualatin, OR 97062 US</p> | |

sammedical.com

IO-Adaptor-IFU-1